

Features

Qualitativ hochstehendes Edelstahlgehäuse

1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Zerstäuber) mit sterilisierbaren Spitzen

In sich geschlossenes Spraywassersystem für Drei-Weg-Spritze und Instrumente (ein Ventil mit Rücklaufsperr verhindert die Kontamination des Spraywassers)

3 Instrumentenschläuche mit Licht (6-Loch Anschluss)

Instrumentenschläuche abnehmbar

Luft- und Wasserregler für jedes Instrument

1 Speichel-/Chirurgieabsaugung mit einfachem Spucktrichter

1 Hochleistungsabsaugung 220 l/min

Stufenlos regulierbar

Zum Patent angemeldete BPR Swiss-Technologie

2 Spraywasserbehälter 2 × 0,75 Liter

2 Absaugbehälter: 2 × 2 Liter (automatischer Überlaufstopp)

Druckluftfilter-Regler mit Schlauch (6mm × 4 mm) für Luftanschluss

Fusspedal mit Spray on/off und Chip

Technische Daten

Luftverbrauch Instrumente: 35–55 l/min

Betriebsdruck Instrumente: 2,5–3,5 bar

Jedes Instrument einzeln einstellbar

Gewicht total: 22 kg

Dimensionen: 535mm × 580mm × 850mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: Elektrischer Motor mit LED Licht, Display und 30 Programmen, elektrischer Zahnsteinentferner, peristaltische Pumpe, Turbine, Luftmotor, Polymerisationslampe, Tableau usw.



Denta-Cart Clinic Für flexible Zahnärzte

Das DENTA-CART CLINIC vereint 1 Drei-Weg-Spritze, 3 Behandlungsinstrumente und 2 Absaugvorrichtungen (integrierte Absaugmaschine) auf einem einzigen Cart!

Es bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Patienten neben den Behandlungen in Ihrer Praxis auch in anderen Institutionen wie Spitälern behandeln zu können. Ihr DENTA-CART CLINIC schieben Sie dabei mühelos von einem Zimmer zum nächsten.

Die Inbetriebnahme des DENTA-CART CLINIC erfordert einzig einen Stromstecker und einen Luftanschluss. Das DENTA-CART CLINIC zeichnet sich neben der Flexibilität in der Anwendung, auch durch hohe Leistung, Wartungsunanfälligkeit, Servicefreundlichkeit und Komfort aus.

Die äusserst leistungsfähige Absaugung (220 l/min!) mit zum Patent angemeldeter BPR Swiss Technologie wird dabei durch die auch im Dauerbetrieb voll leistungsfähigen Instrumente ergänzt. Der hohe Komfort und die Liebe zum Detail zeigen sich in den bequem von aussen abnehmbaren Instrumentenschläuchen und in den äusserst wertvollen Anschlüssen für externe Geräte.

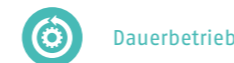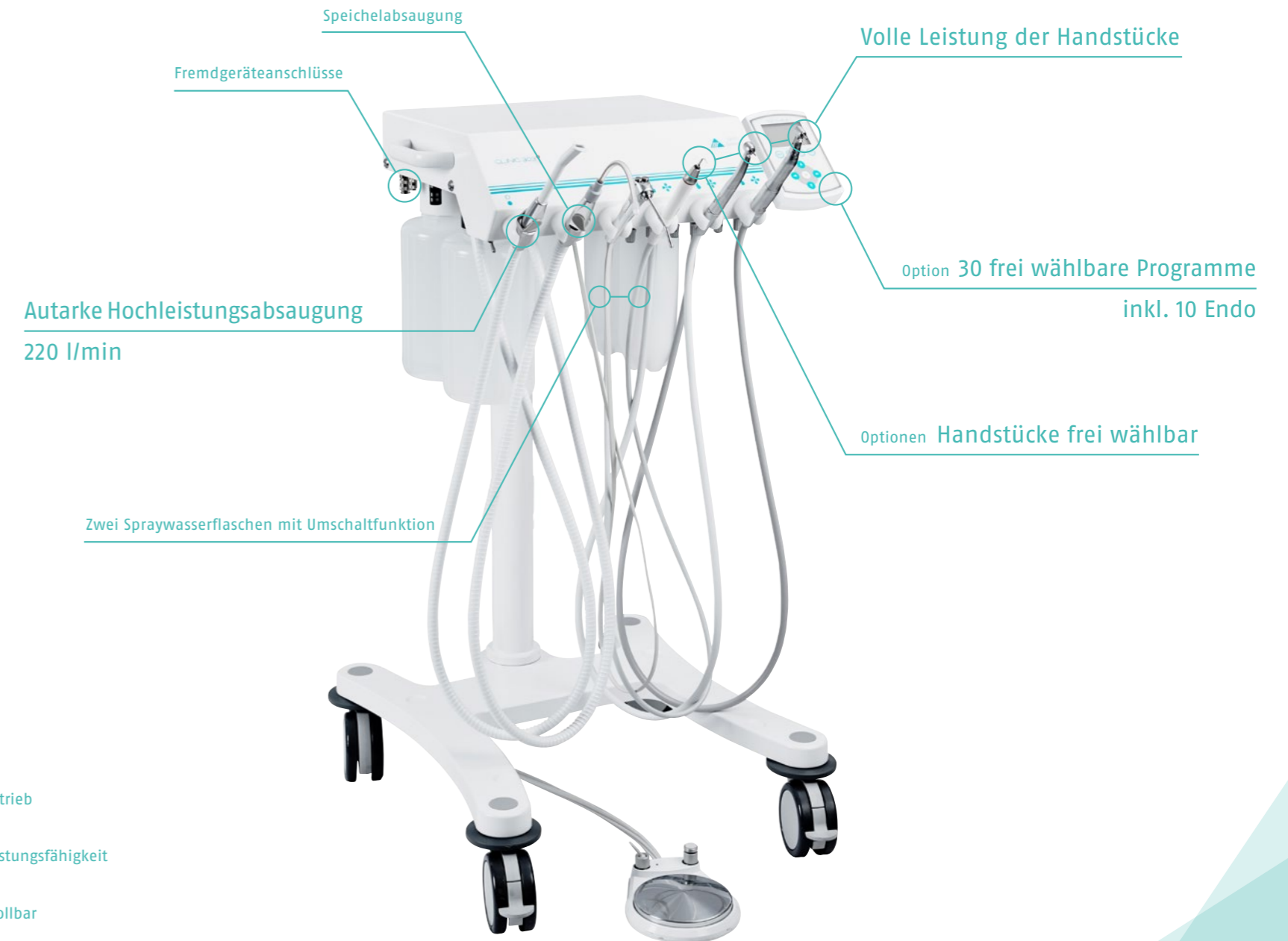

Dauerbetrieb



Volle Leistungsfähigkeit



Mobil/Rollbar