

Features

1 Drei-Weg-Spritze mit sterilisierbaren Spitzen (Schlauch und Spritze abnehmbar)

1 elektrischer Mikromotor mit LED Licht (0-40'000)

1 elektrischer Zahnsteinentferner mit LED Licht

Abnehmbare Instrumentenschläuche

Luft- und Wasserregler für jedes Instrument

In sich geschlossenes Spraywassersystem für Drei-Weg-Spritze und Instrumente (Rücklauf Sperre verhindert Kontamination des Spraywassers)

Spraywasserbehälter: 0,75 Liter

1 Hochleistungsabsaugung 220 l/min. Stufenlos regulierbar. Zum Patent angemeldete BPR Swiss-Technologie Inkl. Speichelabsaugadapter und Speitrichter

1 Absaugbehälter: 1 Liter (automatischer Überlaufstopp)

Druckluftfilter-Regler

Luft- und wasserdichter, korrosionsbeständiger, kratzfester Koffer

Abnehmbarer Frontdeckel

Fusspedal

Integrierter leiser Kompressor – Ölfrei: Max. Druck: 4 bar

DENTA-TROLLEY: Trolley für Instrumente und Verbrauchsmaterial

Technische Daten

Betriebsdruck: 3-4 bar

Jedes Instrument einzeln einstellbar

Gewicht SMART-PORT: 12 kg

Gewicht DENTA-TROLLEY: 8 kg (für Verbrauchsmaterial/Instrumente)

Dimensionen SMART-PORT: 380mm x 205mm x 530mm

Dimensionen DENTA-TROLLEY: 410mm x 400mm x 550mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: Winkelstücke, Air-Polisher Modul, zusätzlicher elektrischer Motor, DENTA-CASE usw.

Smart-Port


Die Leichtigkeit des Seins

Der clever designte SMART-PORT integriert die wichtigsten Funktionen und Antriebe einer Behandlungseinheit in einem einzigen nur 12 Kilogramm leichten Koffer.

Zur Inbetriebnahme muss der SMART-PORT einzig an den Strom angeschlossen werden. Der bereits eingebaute elektrische Mikromotor mit LED Licht und der ebenfalls integrierte elektrische Zahnsteinentferner mit LED Licht haben volle Leistungsfähigkeit.

Durch den Einsatz von verschiedenen Winkelstücken können Drehzahlen zwischen 0 - 200'000 erreicht werden. Das hohe Leistungsvermögen des SMART-PORT wird durch eine äusserst effiziente zum Patent angemeldete Absaugung abgerundet (220 l/min!).

Neben der unvergleichlichen Performance bietet der SMART-PORT einen Rundumkomfort. Das clevere Design ermöglicht einen schnellen und einfachen Auf- und Abbau der Einheit. Zusätzlich beeindruckt der SMART-PORT mit seinem leisen öl-freien Kompressor und bequem von aussen abnehmbaren Instrumentenschläuchen.

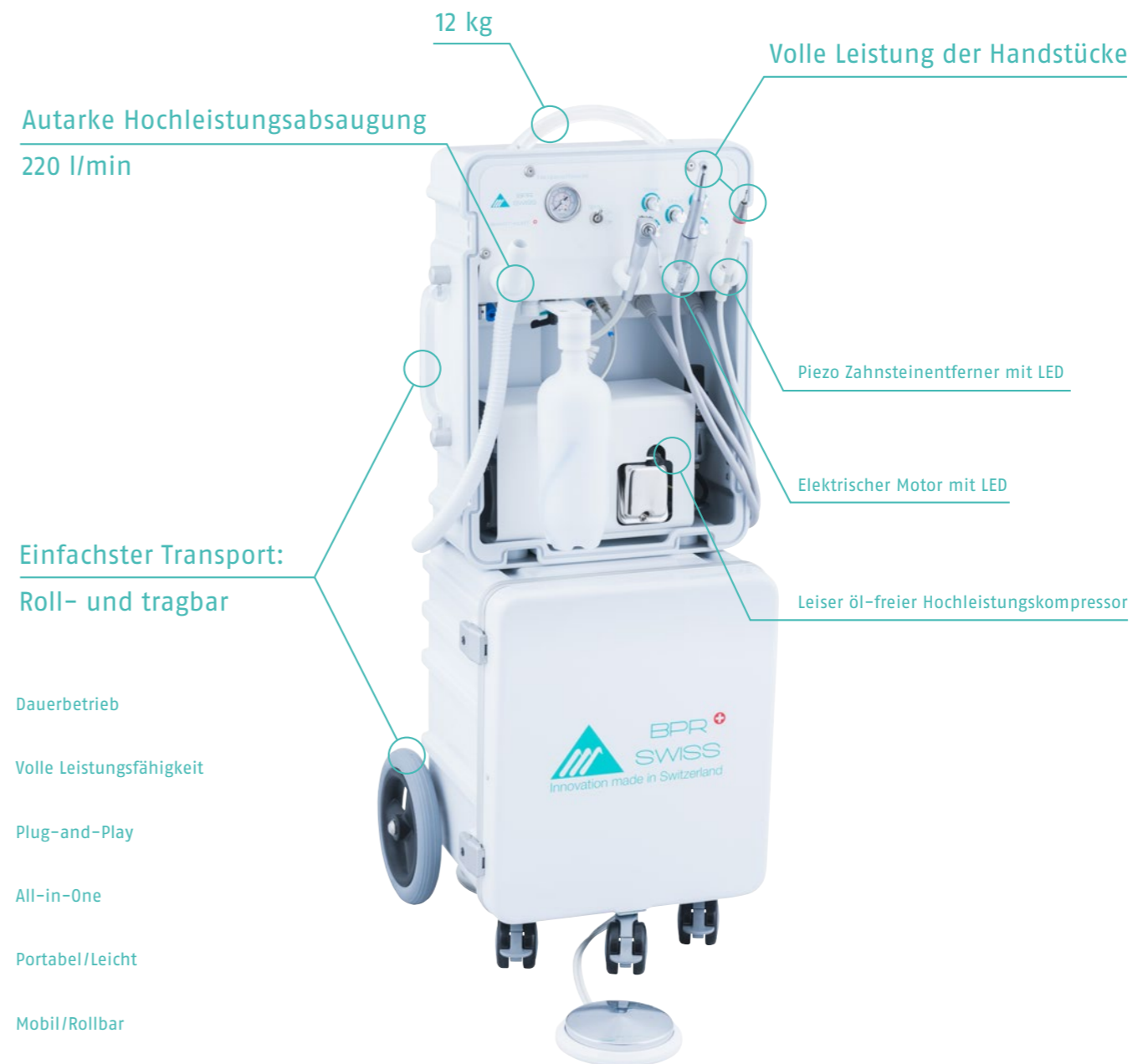

Dauerbetrieb



Volle Leistungsfähigkeit



Plug-and-Play



All-in-One



Portabel/Leicht



Mobil/Rollbar



4 Schubladen für Instrumente / Verbrauchsmaterial
Trennung rote und grüne Zone



Auf einem Trolley Transport von Einheit / Instrumente / Verbrauchsmaterial



Bei Hindernissen oder zum Verstauen wird die Einheit abgedeckt.