

## Features

Qualitativ hochstehendes Edelstahlgehäuse

1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Zerstäuber) mit sterilisierbaren Spitzen

In sich geschlossenes Spraywassersystem für Drei-Weg-Spritze und Instrumente (ein Ventil mit Rücklaufsperr verhindert die Kontamination des Spraywassers)

Spraywasserbehälter: 2 × 0,75 Liter

4 Instrumentenschläuche mit Licht (6-Loch Anschluss)

Instrumentenschläuche abnehmbar

Luft- und Wasserregler für jedes Instrument

Fusspedal mit Spray on/off und Chip

## Technische Daten

Luftverbrauch Instrumente: 35–55 l/min

Betriebsdruck Instrumente: 2,5–3,5 bar

Jedes Instrument ist einzeln einstellbar

Gewicht total: 21 kg

Dimensionen: 535mm × 580mm × 850mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: Elektrischer Motor mit LED Licht, Display und 30 Programmen, elektrischer Zahnsteinentferner, peristaltische Pumpe, Turbine, Luftmotor, Polymerisationslampe, Tableau usw.


## Denta-Cart 404 Einfach genial

Das elegante Behandlungscart DENTA-CART 404 ist installationsfrei und mobil.

Zur Inbetriebnahme muss es lediglich an einen Luftanschluss und mit einem Stromstecker an den Strom angeschlossen werden. Das DENTA-CART 404 vereinfacht auf geniale Weise Ihre Arbeit und bietet Ihnen optimalen Komfort.

Die Instrumente können frei gewählt werden und erreichen auch im Dauerbetrieb volle Leistung. Aus vielen Optionen kann das für Sie perfekte Cart konfiguriert werden.

Der geniale Komfort des DENTA-CART 404 zeigt sich beispielsweise in seiner Wasserversorgung. Es ist mit zwei Spraywasserflaschen ausgestattet. Ist eine Spraywasserflasche leer, kann mit einem Schalter auf die zweite gewechselt und ohne Unterbruch weiterbehandelt werden. Mittels einem Schalter besteht die Möglichkeit zwischen der Wasserversorgung über die Spraywasserflasche und einer externen Wasserversorgung hin und her zu wechseln.

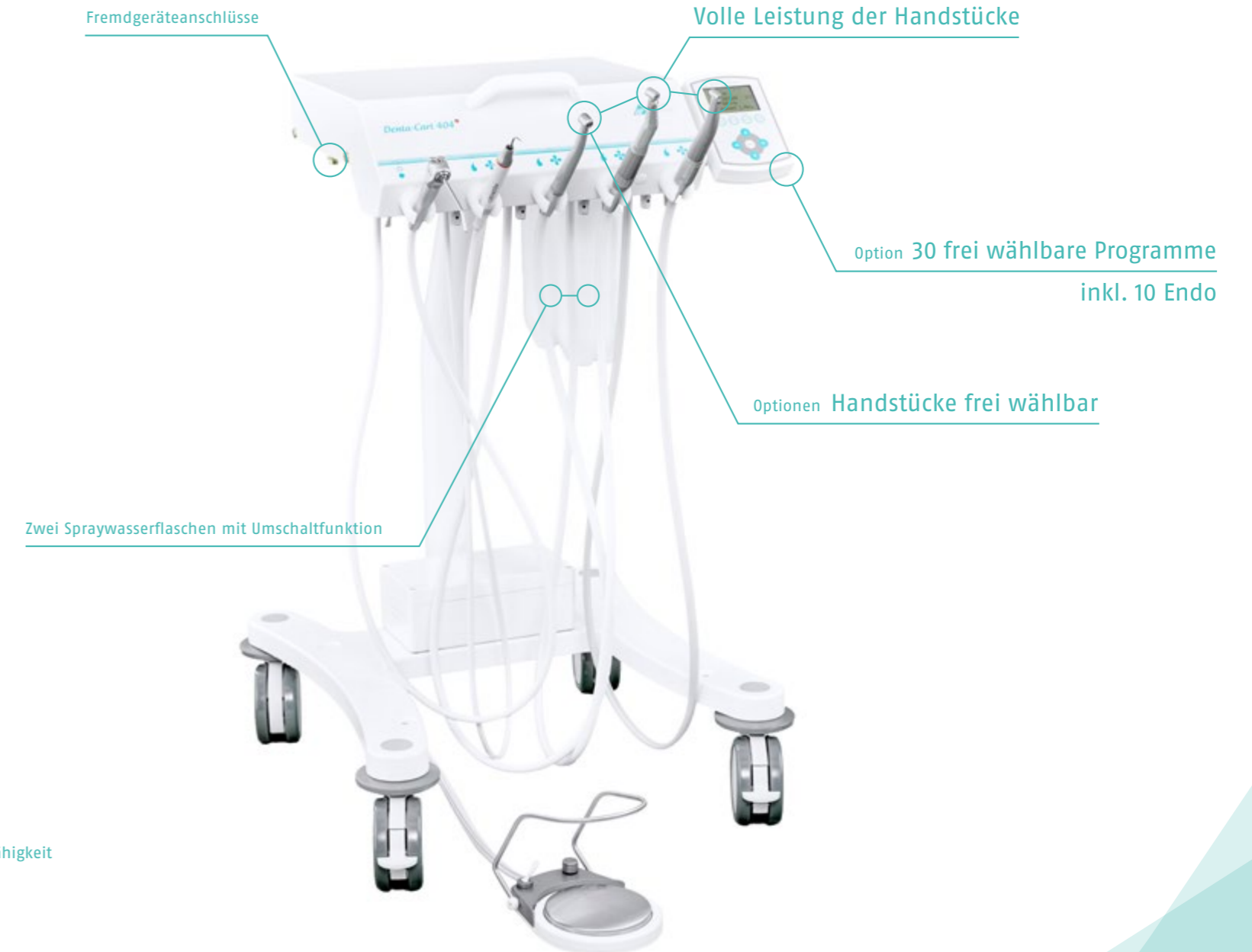

Dauerbetrieb



Volle Leistungsfähigkeit



Mobil/Rollbar