

Features

- 1 Drei-Weg-Spritze mit sterilisierbaren Spitzen (Schlauch und Spritze abnehmbar)
- 1 Elektrischer Mikromotor mit LED Licht (0-40'000)
- 1 Elektrischer Zahnsteinentferner mit LED Licht
- Abnehmbare Instrumentenschläuche
- Luft- und Wasserregler für jedes Instrument
- In sich geschlossenes Spraywassersystem für Drei-Weg-Spritze und Instrumente (Rücklaufsperr verhindert Kontamination des Spraywassers)
- Spraywasserbehälter: 0,75 Liter
- 1 Hochleistungsabsaugung 300 l/min. Stufenlos regulierbar. Einzigartige BPR Swiss Technologie
- Inkl. Speichelabsaugadapter und Speitrichter
- 1 Absaugbehälter: 1 Liter (automatischer Überlaufstopp)
- Druckluftfilter-Regler
- Luft- und wasserdichter, korrosionsbeständiger, kratzfester Koffer
- Abnehmbarer Frontdeckel
- Fusspedal
- Integrierter leiser Kompressor – Ölfrei: Max. Druck: 4 bar
- DENTA-TROLLEY: Trolley für Instrumente und Verbrauchsmaterial

Technische Daten

- Betriebsdruck: 3-4 bar
- Jedes Instrument einzeln einstellbar
- Gewicht SMART-PORT: 12 kg
- Gewicht DENTA-TROLLEY: 8 kg (für Verbrauchsmaterial/Instrumente)
- Dimensionen SMART-PORT: 380mm x 205mm x 530mm
- Dimensionen DENTA-TROLLEY: 410mm x 400mm x 550mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: Winkelstücke, Air-Polisher Modul, zusätzlicher elektrischer Motor, DENTA-CASE usw.

Smart-Port

Die Leichtigkeit des Seins


Der clever designte SMART-PORT integriert die wichtigsten Funktionen und Antriebe einer Behandlungseinheit in einem einzigen nur 12 Kilogramm leichten Koffer.

Zur Inbetriebnahme muss der SMART-PORT einzig an den Strom angeschlossen werden. Der bereits eingebaute elektrische Mikromotor mit LED Licht und der ebenfalls integrierte elektrische Zahnsteinentferner mit LED Licht haben volle Leistungsfähigkeit.

Durch den Einsatz von verschiedenen Winkelstücken können Drehzahlen zwischen 0 - 200'000 erreicht werden. Das hohe Leistungsvermögen des SMART-PORT wird durch die äusserst effiziente, weltweit einzigartige BPR Swiss Absaugung abgerundet (300 l/min!).

Neben der unvergleichlichen Performance bietet der SMART-PORT einen Rundumkomfort. Das clevere Design ermöglicht einen schnellen und einfachen Auf- und Abbau der Einheit. Zusätzlich beeindruckt der SMART-PORT mit seinem leisen ölfreien Kompressor und bequem von aussen abnehmbaren Instrumentenschläuchen.

Portable autonome Behandlungseinheiten

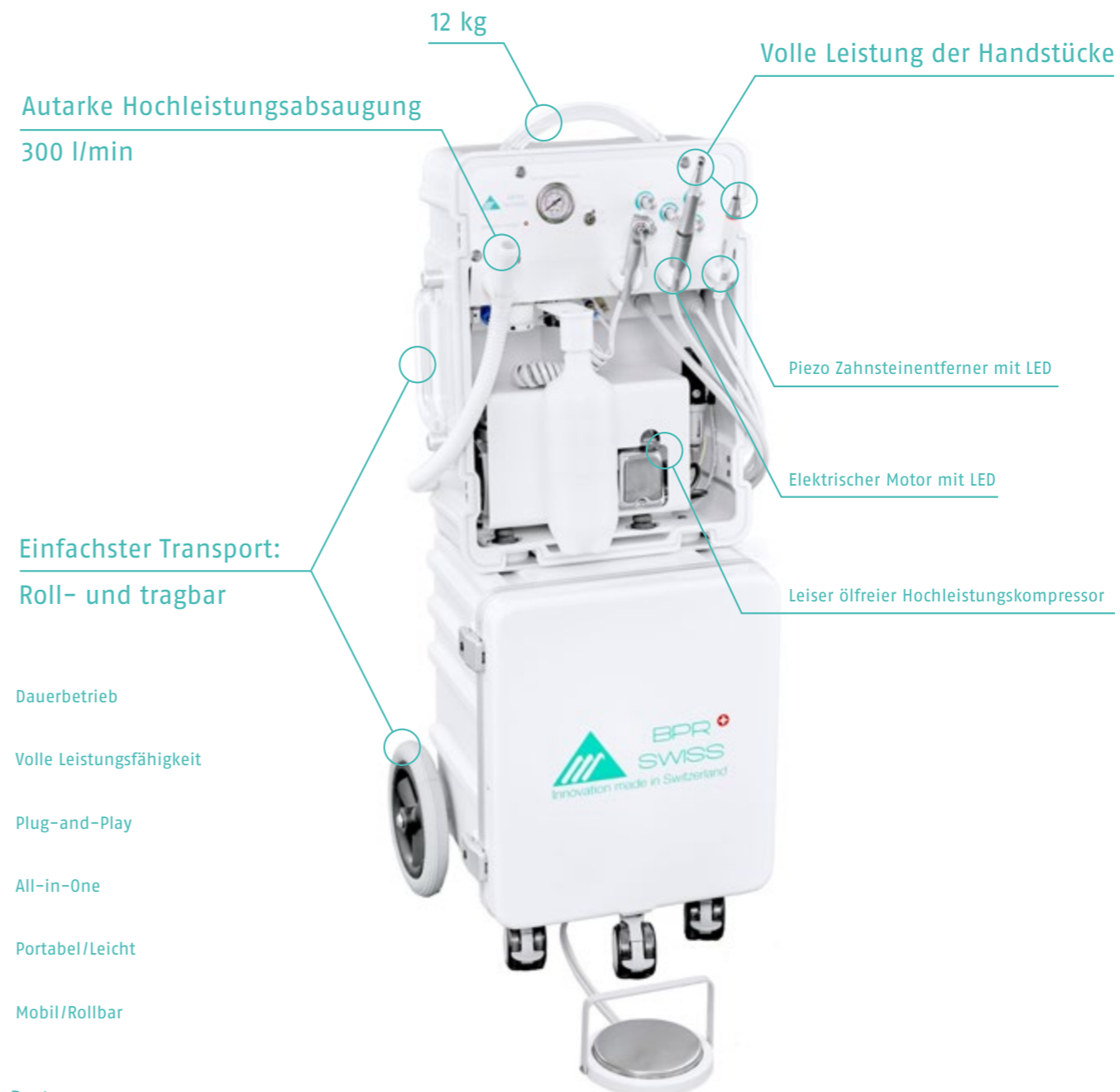

- Dauerbetrieb
- Volle Leistungsfähigkeit
- Plug-and-Play
- All-in-One
- Portabel/Leicht
- Mobil/Rollbar

Smart-Port



4 Schubladen für Instrumente / Verbrauchsmaterial
Trennung rote und grüne Zone



Auf einem Trolley Transport von Einheit / Instrumente / Verbrauchsmaterial



Bei Hindernissen oder zum Verstauen wird die Einheit abgedeckt.

Smart-Port