

Features

- 1 Drei-Weg-Spritze mit sterilisierbaren Spitzen (Schlauch und Spritze abnehmbar)
- 1 Elektrischer Mikromotor mit LED Licht und 30 Programmen (0 – 40'000)
- 1 Elektrischer Zahnsteinentferner mit LED Licht
- Abnehmbare Instrumentenschläuche
- Luft- und Wasserregler für jedes Instrument
- In sich geschlossenes Spraywassersystem für Drei-Weg-Spritze und Instrumente (Rücklaufsperr verhindert Kontamination des Spraywassers)
- 1 Spraywasserbehälter: 0,75 Liter
- 1 Hochleistungsabsaugung 300 l/min. Stufenlos regulierbar. Einzigartige BPR Swiss Technologie Inkl. Speichelabsaugadapter und Speitrichter
- 1 Absaugbehälter: 1 Liter (automatischer Überlaufstopp)
- Druckluftfilter-Regler
- Luft- und wasserdichter, korrosionsbeständiger, kratzfester Koffer
- Abnehmbarer Frontdeckel
- Fusspedal
- Integrierter leiser Kompressor – Ölfrei: Max. Druck: 4 bar
- DENTA-TROLLEY: Trolley für Instrumente und Verbrauchsmaterial

Technische Daten

- Betriebsdruck: 3–4 bar
- Jedes Instrument einzeln einstellbar
- Gewicht SMART-PORT Premium: 12 kg
- Gewicht DENTA-TROLLEY: 8 kg (für Verbrauchsmaterial/Instrumente)
- Dimensionen SMART-PORT Premium: 380mm × 205mm × 530mm
- Dimensionen DENTA-TROLLEY: 410mm × 400mm × 550mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: Winkelstücke, Air-Polisher Modul, zusätzlicher elektrischer Motor, DENTA-CASE usw.

Smart-Port Premium Komfort leicht gemacht

Der clever designte SMART-PORT Premium ist das perfekte Gerät für den mobilen Zahnarzt.


In einem nur 12 Kilogramm leichten Koffer vereinigt der SMART-PORT Premium die wichtigsten Funktionen und Antriebe einer Behandlungseinheit und lässt dabei keine Wünsche offen: Bequemer Transport, effizienter Auf- und Abbau und volle Leistung im Dauerbetrieb.

Der bereits eingebaute elektrische Mikromotor mit LED Licht verfügt über eine Steuerung mit 30 frei wählbaren Programmen. Drehzahl, Drehmoment und gewähltes Winkelstück können dabei frei eingestellt und gespeichert werden.

Durch den Einsatz von verschiedenen Winkelstücken können Drehzahlen zwischen 0 – 200'000 erreicht werden. Sowohl der elektrische Motor als auch der ebenfalls integrierte elektrische Zahnsteinentferner mit LED Licht haben volle Leistungsfähigkeit.

Das hohe Leistungsvermögen des SMART-PORT Premium wird durch die äusserst effiziente, weltweit einzigartige BPR Swiss Absaugung abgerundet (300 l/min!). Das clevere Design ermöglicht einen schnellen und einfachen Auf- und Abbau. Zusätzlich beeindruckt der SMART-PORT Premium mit seinem leisen ölfreien Kompressor.

Portable autonome Behandlungseinheiten

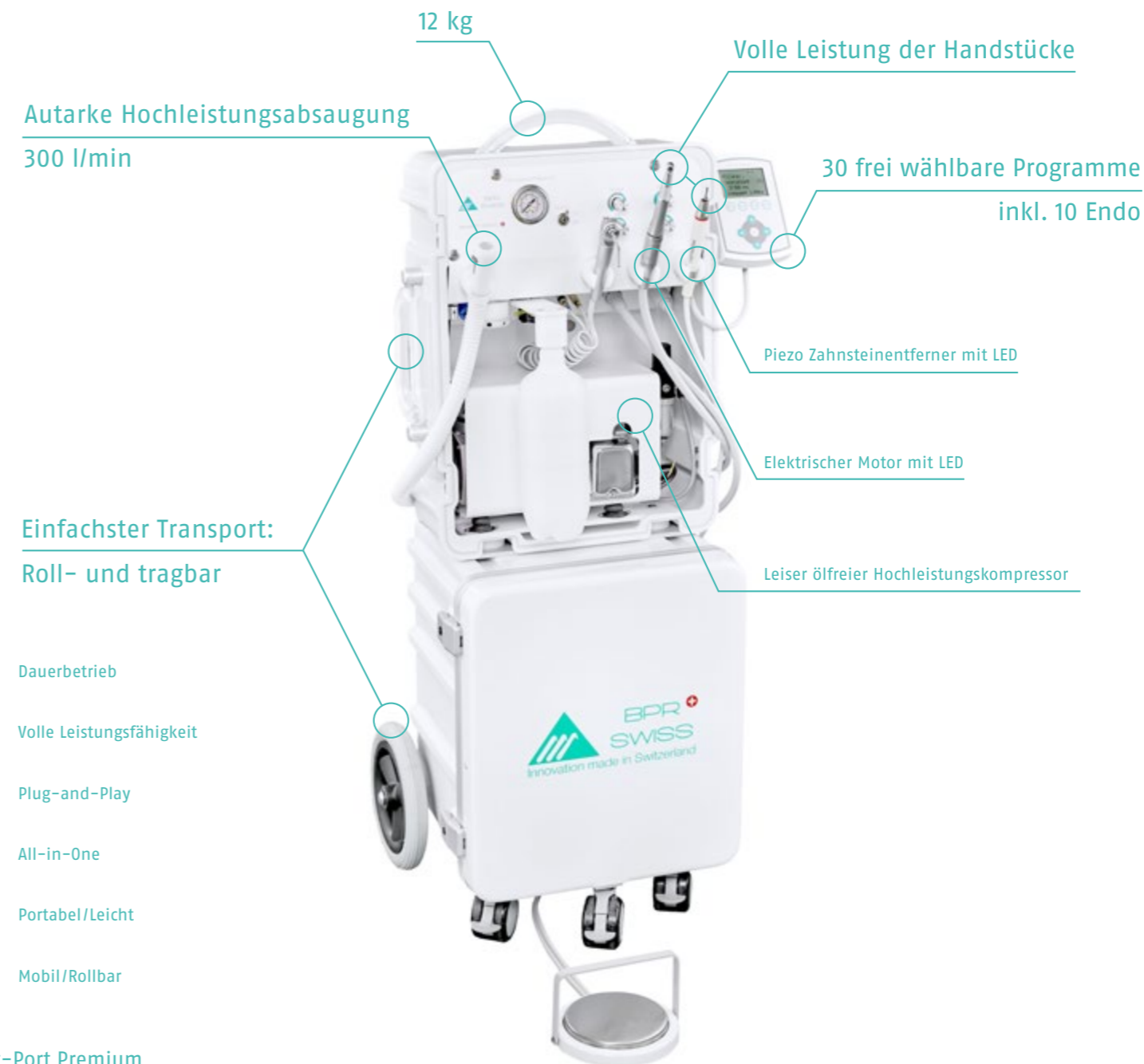

- Dauerbetrieb
- Volle Leistungsfähigkeit
- Plug-and-Play
- All-in-One
- Portabel/Leicht
- Mobil/Rollbar

Smart-Port Premium



4 Schubladen für Instrumente / Verbrauchsmaterial
Trennung rote und grüne Zone



Auf einem Trolley Transport von Einheit / Instrumente / Verbrauchsmaterial



Bei Hindernissen oder zum Verstauen wird die Einheit abgedeckt.

Smart-Port Premium