

## Caractéristiques

Cart à fonctionnement autonome avec compresseur intégré sans huile, système d'aspiration silencieuse et réservoir d'eau fraîche

Carter en acier inoxydable de haute qualité

1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec embouts stérilisables

1 tuyau d'aspiration de salive/chirurgical

1 tuyau d'aspiration de 300 l/min

Réglable en continu

Technologie unique de BPR Swiss

1 tuyau d'aspiration haute performance 300 l/min avec crachoir flexible

2 réservoirs d'eau fraîche : 2 × 2 litres

2 récipients d'aspiration : 2 × 2 litres (arrêt automatique une fois remplis)

Aspiration intégrée avec séparateur d'amalgame

Compresseur intégré – sans huile : Pression max. : 4 bar

## Caractéristiques techniques

Pression de service : 3.0–4.0 bar

Poids total : 60 kg

Dimensions : 355mm × 690mm × 895mm

Max. longueur bras étendu et crachoir : 580mm

Garantie : 2 ans


Options : lampe de polymérisation

## Master-Vac

# Assistant unique au monde

L'élégant MASTER-VAC est le premier cart d'aspiration mobile entièrement autonome dont la fonctionnalité surpasse même les unités installées de façon permanente.

Le crachoir en céramique, qui peut être positionné de manière flexible via un bras, peut être guidé directement sous la bouche du patient. Le rinçage de la bouche est donc facile pour tous les patients, quels que soient leur condition physique, leur âge ou leur taille. Pendant le traitement, le professionnel du secteur dentaire est soutenu par une seringue à trois voies et une impressionnante capacité d'aspiration (300 l/min) avec séparateur d'amalgame. Pas de travaux d'installation coûteux et toujours le meilleur confort grâce à des avantages uniques.

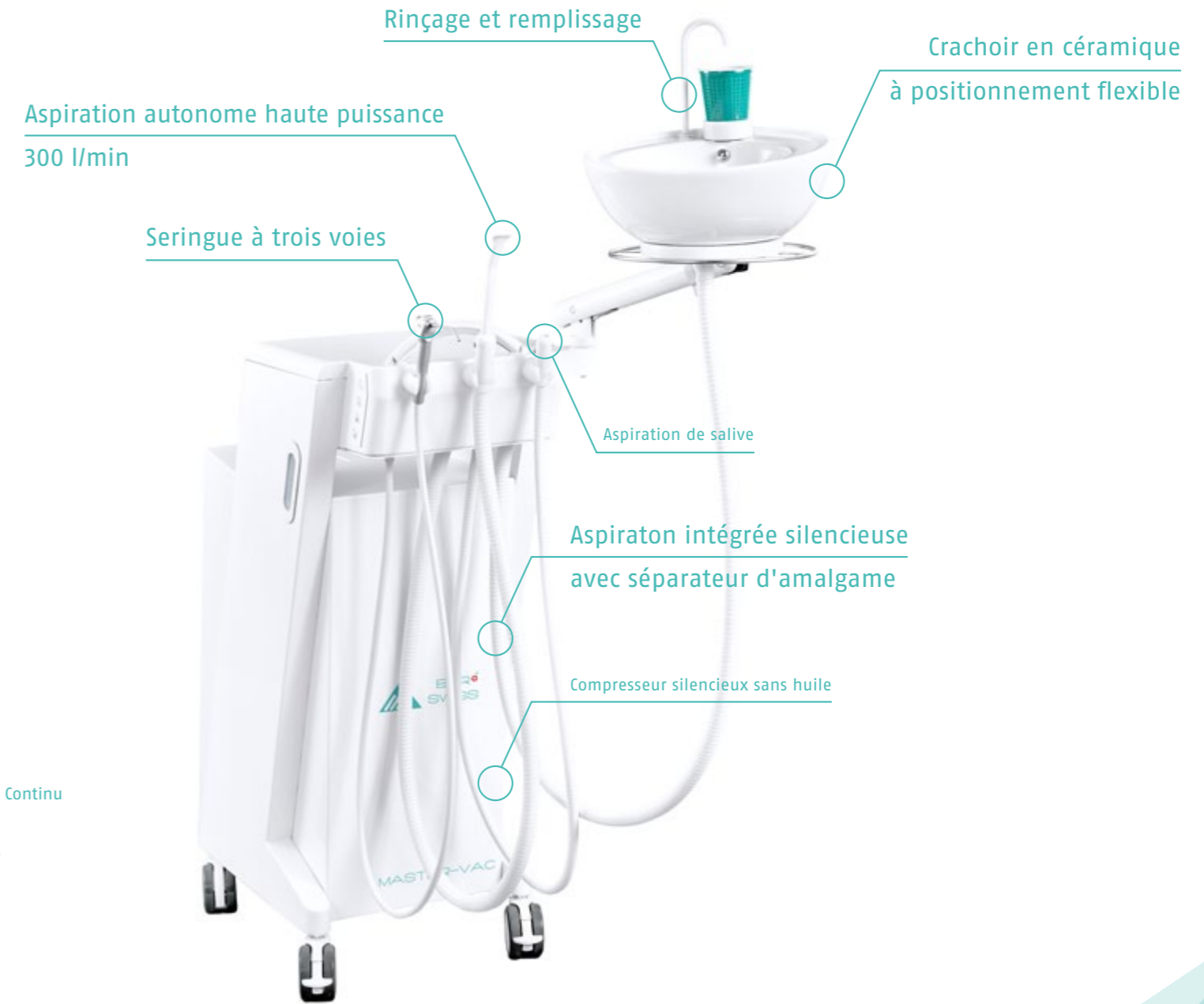

-  Fonctionnement Continu
-  Pleine Puissance
-  Autonome
-  Mobile/Roulable