

## Caractéristiques

- 1 seringue à trois voies avec embouts stérilisables (tuyau et embouts détachables)
- 1 micromoteur électrique avec éclairage LED (0-40'000)
- 1 détartreur électrique avec éclairage LED
- Tuyaux d'instruments amovibles
- Régulateur d'air et d'eau pour chaque instrument
- Système d'eau de spray en circuit fermé pour seringue à trois voies et instruments (clapet anti-retour prévient contamination du système)
- Réservoir d'eau de spray : 0,75 litres
- 1 tuyau d'aspiration haute puissance 300 l/min. Réglable en continu. Technologie unique de BPR Swiss
- Inclut adaptateur pour tuyau d'aspiration pour salive et crachoir
- 1 récipient d'aspiration : 1 litre (arrêt automatique une fois rempli)
- Régulateur de filtre à air comprimé
- Valise étanche à l'air et l'eau, résistante à la corrosion et aux rayures
- Couvercle avant amovible
- Pédale
- Compresseur silencieux intégré – sans huile : Pression max. : 4 bar
- DENTA-TROLLEY : chariot pour instruments et matériaux consommables

## Caractéristiques techniques

- Pression de service : 3-4 bar
- Chaque instrument est réglable individuellement
- Poids SMART-PORT : 12 kg
- Poids DENTA-TROLLEY : 8 kg (pour matériaux consommables/instruments)
- Dimensions SMART-PORT Premium : 380 mm × 205 mm × 530 mm
- Dimensions DENTA-TROLLEY : 410 mm × 400 mm × 550 mm

Garantie : 2 ans

Options : contre-angles, module aéropolisseur, moteur électrique supplémentaire, DENTA-CASE etc.


# Smart-Port La légèreté de l'être

Habilement conçu, le SMART-PORT réunit les principales fonctions et entraînements d'une unité de traitement en une seule valise de 12 kg.

Pour la mise en service du SMART-PORT, seule une prise de courant est nécessaire. Le moteur électrique déjà intégré avec éclairage LED comme le détartreur électrique également intégré avec éclairage LED offrent une puissance complète.

L'utilisation de différents contre-angles permet d'atteindre des régimes moteur entre 0 et 200'000. La capacité de puissance élevée du SMART-PORT est complétée par une aspiration extrêmement efficace avec la technologie unique de BPR Swiss (300 l/min !).

En plus de ces performances incomparables, le SMART-PORT offre un confort complet. La conception intelligente assure un montage et un démontage rapides et faciles de l'unité. Par ailleurs, le SMART-PORT impressionne par son compresseur silencieux et sans huile et ses tuyaux d'instruments faciles à retirer de l'extérieur.

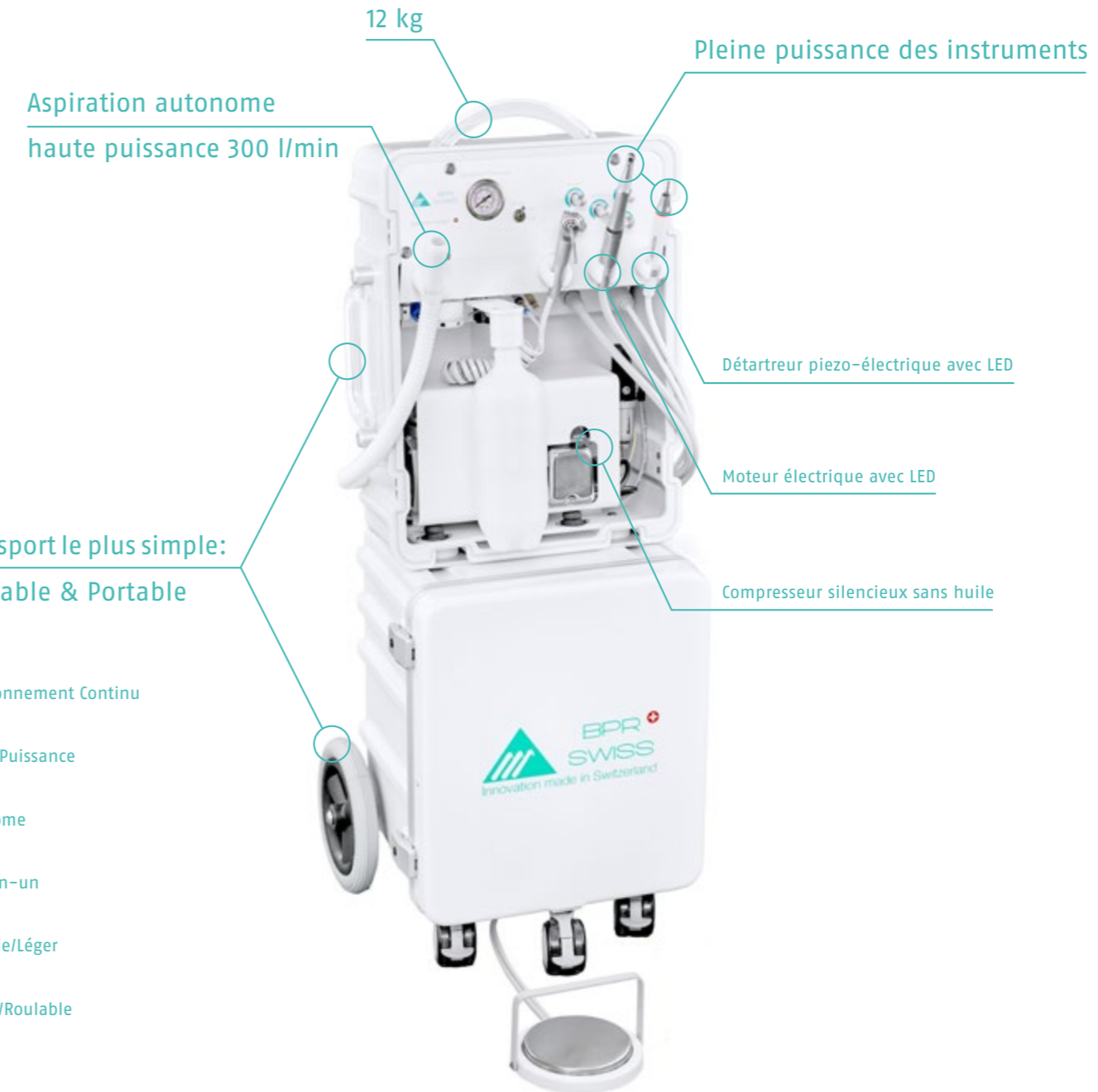

- Fonctionnement Continu
- Pleine Puissance
- Autonome
- Tout-en-un
- Portable/Léger
- Mobile/Roulable



4 tiroirs pour instruments / consommables ; Séparation de la zone rouge et verte



Transport de l'unité/instruments/consommables sur un trolley



Roulable et portable: L'unité peut être désaccouplée en cas d'obstacles ou pour la ranger.