

## Caractéristiques

- 1 seringue à trois voies avec embouts stérilisables (tuyau et embouts détachables)
- 1 micromoteur électrique avec éclairage LED et 30 Programmes (0-40'000)
- 1 détartreur électrique avec éclairage LED
- 1 tuyau d'instrument avec lumière (pour turbine/aéropolisseur)
- Tuyaux d'instruments amovibles
- Régulateur d'air et d'eau pour chaque instrument
- Système d'eau de spray en circuit fermé pour seringue à trois voies et instruments (clapet anti-retour prévient contamination du système)
- 1 réservoir d'eau de spray : 0,75 litres
- 1 tuyau d'aspiration haute puissance 300 l/min. Réglable en continu. Technologie unique de BPR Swiss Avec adaptateur pour tuyau et crachoir
- 1 récipient d'aspiration : 1 litre (arrêt automatique une fois rempli)
- Régulateur de filtre à air comprimé
- Valise étanche à l'air et l'eau, résistante à la corrosion et aux rayures
- Couvercle avant amovible
- Pédale
- Compresseur silencieux intégré - sans huile
- DENTA-TROLLEY : Trolley pour instruments et matériaux consommables

## Caractéristiques techniques

- Pression de service : 5-7 bar
- Chaque instrument est réglable individuellement
- Poids SUPER-PORT : 17 kg
- Poids DENTA-TROLLEY : 8 kg (pour matériaux consommables/instruments)
- Dimensions SUPER-PORT : 380 mm x 205 mm x 530 mm
- Dimensions DENTA-TROLLEY : 410 mm x 400 mm x 550 mm

Garantie : 2 ans

Options : turbine, aéropolisseur, moteur électrique supplémentaire, contre-angles, DENTA-CASE etc.

## Super-Port


# Le maître de toutes les classes

Le SUPER-PORT est l'unité de traitement portable la plus complète et la plus confortable au monde. Le SUPER-PORT autosuffisant réunit une unité de traitement complète comprenant un compresseur et une machine d'aspiration dans une valise de 17 kg seulement.

Le SUPER-PORT est équipé d'un moteur électrique avec éclairage LED, d'un détartreur ultrasonique avec éclairage LED, d'un tuyau d'instrument pour votre turbine/aéropolisseur et d'un système d'aspiration (300 l/min !). Tous les instruments et l'aspiration ont les mêmes performances qu'une unité de traitement installée en permanence et peuvent être utilisés en fonctionnement continu.

Le micromoteur électrique intégré avec lumière LED dispose d'une commande avec 30 programmes librement sélectionnables (y compris endo). La vitesse, le couple et le contre-angle sélectionnée peuvent être réglés librement. En plus du moteur, vous pouvez également utiliser votre turbine ou votre aéropolisseur à pleine puissance en fonctionnement continu.

La haute performance du SUPER-PORT est complétée par un système d'aspiration d'une efficacité impressionnante et d'une technologie unique de BPR Swiss (300 l/min !). La conception intelligente du SUPER-PORT, associée au DENTA-TROLLEY, permet un montage et un démontage efficaces ainsi qu'un transport aisé.

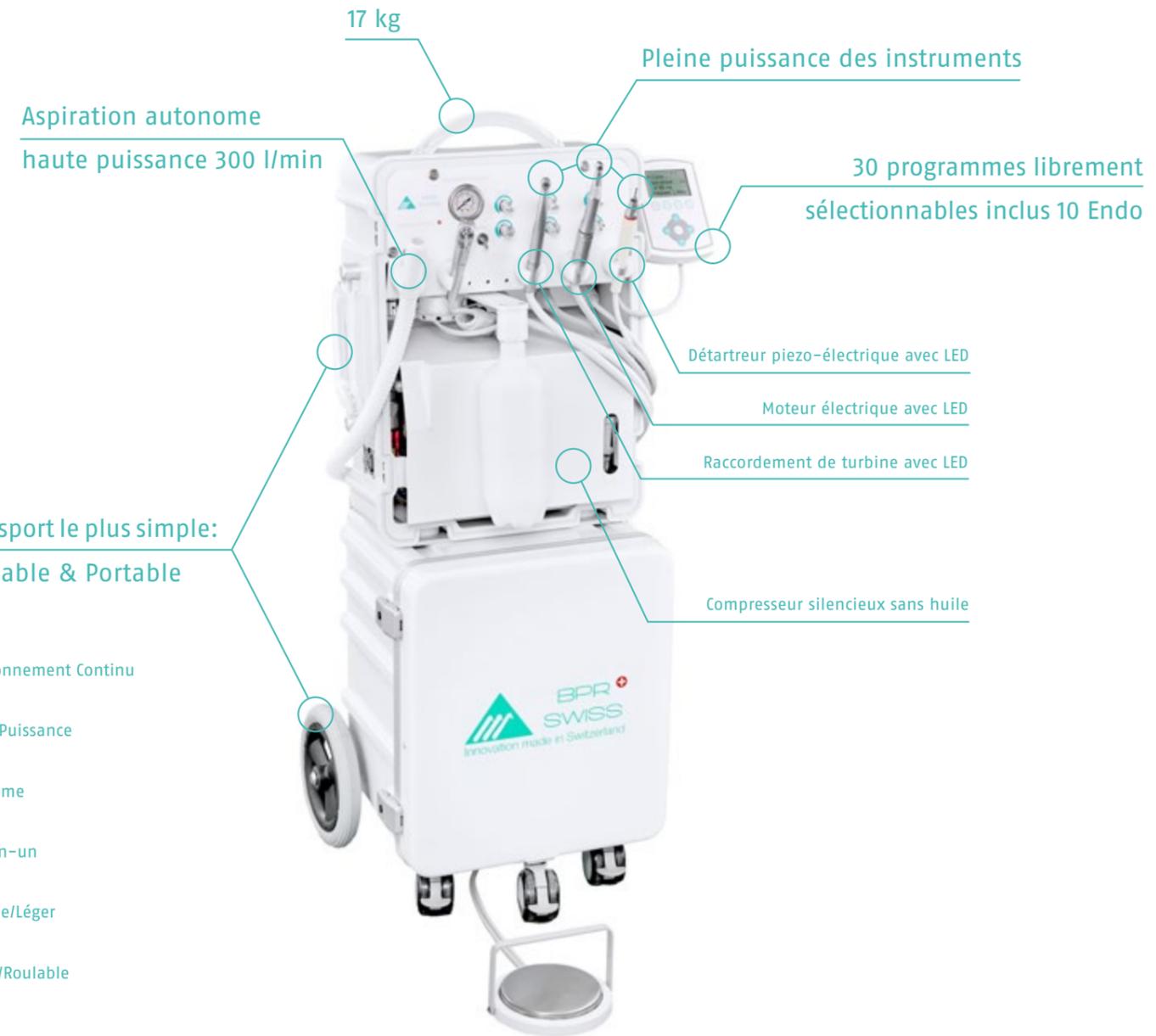

- Fonctionnement Continu
- Pleine Puissance
- Autonome
- Tout-en-un
- Portable/Léger
- Mobile/Roulable



4 tiroirs pour instruments / consommables ; Séparation de la zone rouge et verte



Transport de l'unité/instruments/consommables sur un trolley



Roulable et portable: L'unité peut être désaccouplée en cas d'obstacles ou pour la ranger.