

Caractéristiques

1 seringue à trois voies avec embouts stérilisables (tuyau et embouts détachables)

1 micromoteur électrique avec éclairage LED et 30 Programmes (0-40'000)

1 détartreur électrique avec éclairage LED

Tuyaux d'instruments amovibles

Régulateur d'air et d'eau pour chaque instrument

Système d'eau de spray en circuit fermé pour seringue à trois voies et instruments (clapet anti-retour prévient contamination du système)

1 réservoir d'eau de spray : 0,75 litres

1 tuyau d'aspiration haute puissance 300 l/min. Réglable en continu. Technologie unique de BPR Swiss Avec adaptateur pour tuyau et crachoir

1 récipient d'aspiration : 1 litre (arrêt automatique une fois rempli)

Régulateur de filtre à air comprimé

Valise étanche à l'air et l'eau, résistante à la corrosion et aux rayures

Couvercle avant amovible

Pédale

Compresseur silencieux intégré – sans huile : Pression max. : 4 bar

DENTA-TROLLEY : chariot pour instruments et matériaux consommables

Caractéristiques techniques

Pression de service : 3-4 bar

Chaque instrument est réglable individuellement

Poids SMART-PORT Premium : 12 kg

Poids DENTA-TROLLEY : 8 kg (pour matériaux consommables/instruments)

Dimensions SMART-PORT Premium : 380 mm x 205 mm x 530 mm

Dimensions DENTA-TROLLEY : 410 mm x 400 mm x 550 mm

Garantie : 2 ans

Options : contre-angles, module aéropolisseur, moteur électrique supplémentaire, DENTA-CASE etc.

Smart-Port Premium

Le confort en toute simplicité


La conception intelligente du SMART-PORT Premium en fait l'appareil idéal pour le dentiste mobile.

Dans une valise pesant seulement 12 kilogrammes, le SMART-PORT Premium réunit les principales fonctions et entraînements d'une unité de soins et répond à toutes les attentes. Transport confortable, montage et démontage efficaces et pleine puissance en fonctionnement continu.

Le micromoteur électrique avec éclairage LED déjà intégré dispose d'une commande avec 30 programmes sélectionnables. Il est possible de régler librement et d'enregistrer le régime, le couple et le contre-angle sélectionné.

L'utilisation de différents contre-angles permet d'atteindre des régimes moteur entre 0 et 200'000. Le moteur électrique comme le détartreur électrique également intégré avec éclairage LED offrent une puissance complète.

La capacité de puissance élevée du SMART-PORT Premium est complétée par une aspiration extrêmement efficace avec la technologie unique de BPR Swiss (300 l/min !). La conception intelligente assure un montage et un démontage rapides et faciles. Par ailleurs, le SMART-PORT Premium fait forte impression avec son compresseur silencieux.

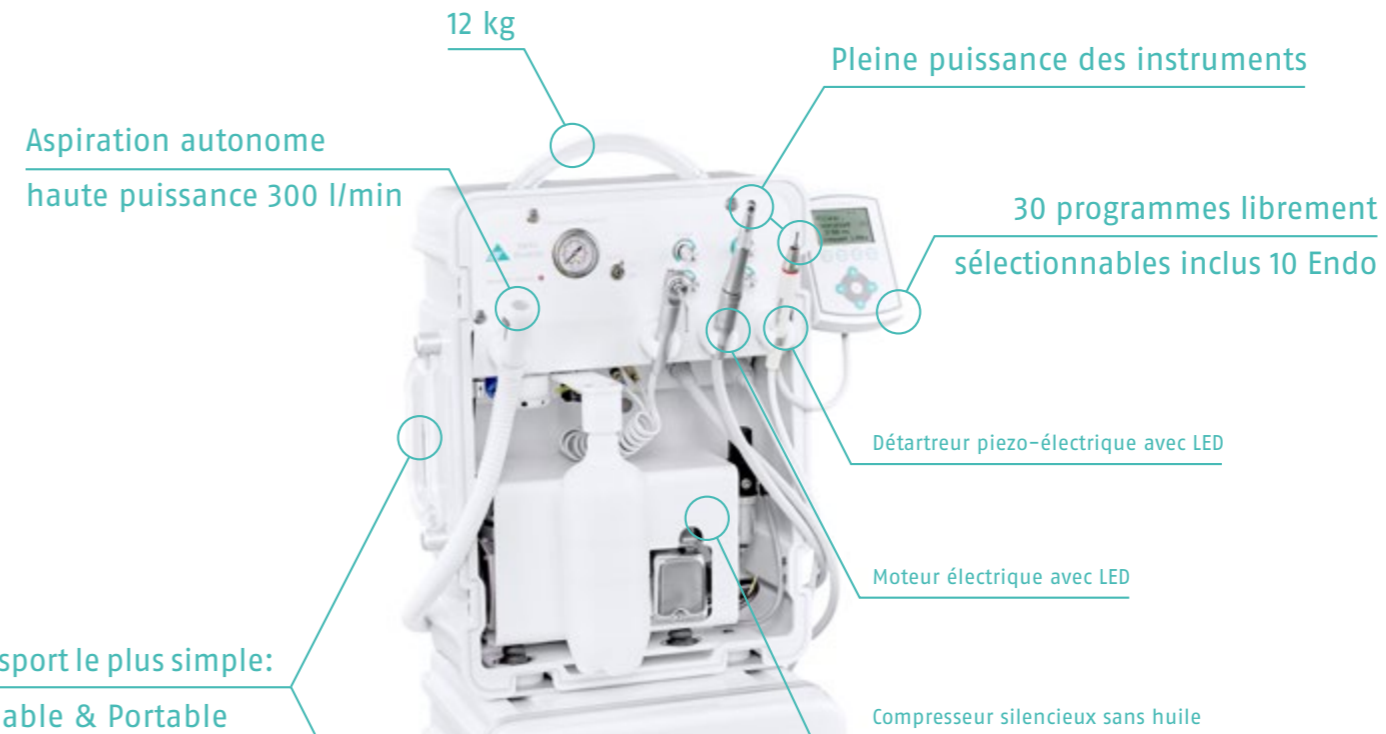

Transport le plus simple:
Roulable & Portable

- Fonctionnement Continu
- Pleine Puissance
- Autonome
- Tout-en-un
- Portable/Léger
- Mobile/Roulable

Smart-Port Premium



4 tiroirs pour instruments / consommables ; Séparation de la zone rouge et verte



Transport de l'unité/instruments/consommables sur un trolley



Roulable et portable: L'unité peut être désaccouplée en cas d'obstacles ou pour la ranger.

Smart-Port Premium