

Erstklassige Zahnbehandlungen.
Jederzeit. Unabhängig.



BPR[®]
SWISS

Innovation made in Switzerland

Behandlungseinheiten

Katalog 2024 / 2025

Die Behandlungseinheiten von BPR Swiss Innovation mit Klasse

Die meisten Zahnmediziner werden durch baukostenintensive, unbewegliche oder leistungsschwache Dentaleinheiten eingeschränkt. BPR Swiss unterstützt seine Kunden mit einzigartig mobilen, autarken und leistungsstarken Dentaleinheiten. Damit sie jederzeit standortungebunden und kosteneffizient mit perfekter Leistung behandeln können.

Die Erfolge seiner Kunden machen BPR Swiss seit über 25 Jahren zum Marktführer im Bereich mobiler und autarker Dentaleinheiten. Die in der Schweiz hergestellten BPR Swiss Behandlungseinheiten bestechen durch weltweit einzigartige Funktion, Flexibilität, Effizienz und Eleganz. Mit den autarken Dentaleinheiten P3 Master und P3 sparen Zahnmediziner hohe Baukosten und gewinnen Flexibilität in Karriereplanung und Praxisalltag. Die Verwendung werthaltiger Materialien kombiniert mit einer hohen Verarbeitungsqualität garantieren geringe Unterhaltskosten sowie einen unvergleichlich hohen Behandlungskomfort.



Autonom



Höchste Leistung



Beste Qualität

Produktübersicht



6 Autarke Dentaleinheit P3 Master



12 Autarke Dentaleinheit P3



16 Semi-Autarke Dentaleinheit I3



P3-Cart
8/9



Master-Vac
10/11



Pro-Vac
14/15



Denta-Cart 404
18/19



Denta-Vac
20/21



Denta-Chair 404
22



Denta-LED
23

Entwickelt und hergestellt in
Oberdiessbach, Schweiz.



Weltweit vertrieben.



Expertenmeinungen

Seit 2012 begeistert von P3

Ich arbeite seit 2012 mit der P3-Einheit und bin noch immer begeistert. Gleich bei der Anschaffung war es sehr angenehm keine Installationen vornehmen zu müssen und trotzdem mit demselben Komfort und zusätzlicher Flexibilität zu arbeiten. Leistungsmässig bietet die BPR Swiss Einheit dasselbe Spektrum wie eine herkömmliche Einheit. Auch bezüglich den Kosten bin ich positiv überrascht, nebst den wegfallenden Umbaukosten sind die Wartung- und Unterhaltskosten deutlich wirtschaftlicher.

Dr. Marc Frei (Bern, Schweiz)

Das beste System auf dem Markt

Seit 5 Jahren setzen wir BPR Swiss-Produkte in grossem Umfang ein, sind hoch zufrieden mit ihrer Leistung und können sie sehr empfehlen, da sie sich als äusserst hilfreich bei der Bereitstellung zahnärztlicher Leistungen für die Schulkinder in Kuwait erwiesen haben. Die einzigartigen Leistungsmerkmale des Combi-Cart Clinic 303 sind mehr als überzeugend, z.B.: das autonome Frischwassersystem, das hochwertige Edelstahlgehäuse, der ölfreie Kompressor, das digitale Display, der minimale Geräuschpegel und die mühelose Portabilität. Die Sun-LED mit Aluminiumgehäuse ist einfach zu transportieren und zu verstauen, und die berührungslose Ein-/Ausschaltfunktion ist eine exzellente Option. Unserer Erfahrung nach ist es zweifellos das beste portable System, welches auf dem Markt verfügbar ist.

Dr. J. Ariga (Leiter des Schulprogramms zur Zahngesundheit MOH Kuwait, Kuwait City, Kuwait)

Lebensverändernde Ausrüstung

Während der vergangenen fünf Jahre hat unsere Organisation, MondZorgPlus, mit BPR Swiss zusammengearbeitet. MondZorgPlus behandelt ältere Personen, die nicht in der Lage sind, einen Zahnarzt aufzusuchen. Wir besuchen sie und behandeln sie in ihrer gewohnten Umgebung. Da wir auf Flexibilität angewiesen sind und uns von Zimmer zu Zimmer bewegen müssen, haben wir uns für eine Zusammenarbeit mit BPR Swiss entschieden! BPR Swiss bietet uns die Möglichkeit, den Patienten auf mühelose Weise mit zuverlässiger zahnärztlicher Ausrüstung zu behandeln. Wir freuen uns, unseren Patienten die professionelle Behandlung bieten zu können, die sie benötigen. Unsere niederländische Organisation möchte sich bei BPR Swiss für diese lebensverändernde Ausrüstung bedanken.

MondZorgPlus (Organisation spezialisiert auf Alterszahnmedizin, Raamsdonksveer, Niederlande)

Sehr zufrieden mit Cart

Ich bin sehr zufrieden mit Ihrem Cart, es entspricht meinen Erwartungen. Ich kann es ohne zu zögern weiterempfehlen und Sie können meine Kontaktdaten gerne an meinen französischen Kollegen weitergeben, die weitere Informationen benötigen.

Dr. Alain Bourit (Bourges, Frankreich)

Unsere Zahnärzte sind sehr glücklich damit

Wir arbeiten in unserer Klinik seit 2016 mit dem Combi-Cart Clinic von BPR Swiss. Unser Combi-Cart Clinic bietet uns optimale Flexibilität und gleichzeitig volle Leistung und tollen Komfort. Unsere Zahnärzte sind sehr glücklich damit.

Dr. Ulrike Spies (Marburg, Deutschland)

Beste Qualität und Verlässlichkeit

Seit mehr als 15 Jahren arbeiten meine Dentalhygienikerin und ich bereits mit den mobilen Behandlungscarts Denta-Cart 404 und Denta-VAC von BPR Swiss und wir sind noch immer begeistert. Bei unserer täglichen Arbeit mit den Einheiten, sind wir auf beste Qualität und Verlässlichkeit angewiesen. Diese beiden Punkte erfüllen die zwei Geräte perfekt. In 15 Jahren Arbeit mit den mobilen Carts, hatten wir keinen einzigen Ausfall zu beklagen(!). Neben zwei ordentlichen Wartungen ist seit 2003 nur eine einzige kleinere Reparatur angefallen.

Als Praxisinhaber mit 35 Jahren Erfahrung und Kontrolleur von Zahnarztpraxen im Kanton Neuenburg höre und sehe ich vieles über andere Produkte. Die Qualität und die Robustheit bei gleichzeitig einwandfreier Leistung der BPR Swiss Einheiten sind aussergewöhnlich. Zusammengefasst bin ich hochzufrieden mit meinen Einheiten von BPR Swiss und kann die Einheiten jederzeit vollumfänglich weiterempfehlen.

Dr. Eric Develey (La Chaux-de-Fonds, Schweiz)

Autarke Dentaleinheit P3 Master

Einzigartig in Funktion, Flexibilität, Effizienz und Komfort.

Die elegante, vollkommen autarke und mobile Dentaleinheit P3 Master ist weltweit einzigartig in ihrer Kombination aus Funktion, Flexibilität, Effizienz und Komfort. Für die Inbetriebnahme müssen lediglich 3 Stecker an den Strom angeschlossen werden. Damit sparen Zahnmediziner hohe Baukosten und gewinnen Flexibilität in Karriereplanung und Praxisalltag. Sämtliche Handstücke sind frei wählbar und verfügen über volle Leistungsfähigkeit im Dauerbetrieb, wie eine fix installierte Einheit. Die Absaugung mit optionalem Amalgamabscheider übertrifft mit ihrer beeindruckenden Absaugleistung (300 l/min) die meisten herkömmlichen Dentaleinheiten. Das flexibel über einen Arm positionierbare Keramikspeibecken kann direkt unter den Mund des Patienten geführt werden. Das Spülen des Mundes fällt damit allen Patienten unabhängig von Fitness, Alter oder Körpergröße ganz leicht. Die P3 Master bietet aufgrund ihres leisen ölfreien Betriebs auch in diesem Bereich umfassenden Komfort.

Die autarke Dentaleinheit P3 Master.
Einzigartig in Funktion, Flexibilität, Effizienz und Komfort.
Für Zahnmediziner und Patienten.

P3-Cart
Seiten 8/9

Denta-LED
Seite 23

Denta-Chair 404
Seite 22

Master-Vac
Seiten 10/11



Features

Autonom funktionierendes Cart mit integriertem ölfreiem Kompressor und Spraywasserbehälter

Qualitativ hochstehendes Edelstahlgehäuse

1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Zerstäuber) mit sterilisierbaren Spitzen

In sich geschlossenes Spraywassersystem für Drei- Weg-Spritze und Instrumente (ein Ventil mit Rücklaufsperr verhindert die Kontamination des Spraywassers)

Spraywasserbehälter: 2 × 0,75 Liter

4 Instrumentenschläuche mit Licht (6-Loch Anschluss)

Instrumentenschläuche abnehmbar

Luft- und Wasserregler für jedes Instrument

Fusspedal mit Sprayventil on/off und Chip

Leistung integrierter Kompressor: 75 l/min bei 4 bar;
Schalldruckpegel: 48 dB; Druckluftbehälter: 4 Liter

Technische Daten

Luftverbrauch Instrumente: 35-55 l/min

Betriebsdruck Instrumente: 2,5-3,5 bar

Jedes Instrument ist einzeln einstellbar

Gewicht total: 53 kg

Dimensionen: 535mm × 580mm × 960mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: Elektrischer Motor mit LED Licht, Display und 30 Programmen, elektrischer Zahnsteinentferner, peristaltische Pumpe, Turbine, Luftmotor, Polymerisationslampe, Tableau usw.

P3-Cart Freiheit pur



Das elegante autonome Behandlungscart P3-CART ist vollkommen installationsfrei und mobil. Für die Inbetriebnahme muss einzig ein Stromstecker eingesteckt werden!

Die Instrumente können frei gewählt werden und erreichen auch im Dauerbetrieb volle Leistung.

Die hohe Leistungsfähigkeit des P3-CART wird durch kompromisslosen Komfort ergänzt. Der Betrieb des Carts ist flüsterleise (48 dB!) und ölfrei.

Zum hohen Komfort gehört auch die Liebe zum Detail. Diese zeigt sich beim P3-CART in den von aussen abnehmbaren Instrumentenschläuchen, äusserst nützlichen Anschlüssen für den Betrieb externer Geräte und der Ausstattung mit zwei Spraywasserflaschen. Ist eine Spraywasserflasche leer, kann mit einem Schalter auf die zweite gewechselt und ohne Unterbruch weiterbehandelt werden.



-  Dauerbetrieb
-  Volle Leistungsfähigkeit
-  Plug-and-Play
-  Mobil/Rollbar

P3-Cart

Features

Autonom funktionierendes Cart mit integrierten ölfreien Kompressor, leisem Absaugsystem und Frischwasserbehälter

Qualitativ hochstehendes Edelstahlgehäuse

1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Spray) mit sterilisierbaren Spitzen

1 Speichel-/Chirurgieabsaugung

1 Hochleistungsabsaugung 300 l/min

Stufenlos regulierbar

Einzigartige BPR Swiss Technologie

1 Hochleistungsabsaugung 300 l/min mit flexiblem Speibecken

2 Frischwasserbehälter: 2 × 2 Liter

Absaugbehälter: 6 Liter (automatischer Überlaufstopp)

Integrierte Absaugung

Integrierter ölfreier Kompressor: Max. Betriebsdruck von 4 bar

Technische Daten

Betriebsdruck: 3,0–4,0 bar

Gewicht: 60 kg

Dimensionen: 355mm × 690mm × 895mm

Max. Länge ausgefahrener Arm und Speibecken: 580mm

Garantie: 2 Jahre





Optionen: Polymerisationslampe, Amalgamabscheider

Master-Vac

Weltweit einzigartiger Assistent

Das elegante MASTER-VAC ist das erste komplett autonome Absaugcart, dessen Funktionalität selbst fix installierte Einheiten übertrifft.

Das flexibel über einen Arm positionierbare Keramikspeibecken kann direkt unter den Mund des Patienten geführt werden. Das Spülen des Mundes fällt damit allen Patienten unabhängig von Fitness, Alter oder Körpergröße ganz leicht. Während der Behandlung werden Sie als Behandelnde durch eine Drei-Weg-Spritze und eine beeindruckende Absaugleistung (300 l/min), die viele fix installierte Einheiten übertrifft, unterstützt. Keine kostspieligen Installationsarbeiten und trotzdem bester Komfort durch einzigartige Vorteile.

-  Dauerbetrieb
-  Volle Leistungsfähigkeit
-  Plug-and-Play
-  Mobil/Rollbar

Master-Vac



Autarke Dentaleinheit P3

Unabhängigkeit. Innovation. Klasse.

Die elegante P3 ist eine vollkommen autarke und mobile Behandlungseinheit. Sie erfordert keine Installation. Für die Inbetriebnahme müssen lediglich 3 Stecker an den Strom angeschlossen werden. Sämtliche Handstücke sind frei wählbar. Sowohl die Handstücke als auch die Absaugung verfügen über volle Leistungsfähigkeit im Dauerbetrieb, wie eine fix installierte Einheit. Die mit einem integrierten Kompressor und Absaugmaschine ausgestattete, sehr leistungsfähige P3 bietet aufgrund ihres ölfreien und ausgesprochen leisen Betriebs (48 dB!) umfassenden Komfort. Zusätzlich erlauben die komplett mobilen Carts der P3 höchste Flexibilität.

Die autarke Dentaleinheit P3.
Unabhängigkeit. Innovation. Klasse.

P3-Cart
Seiten 8/9

Denta-LED
Seite 23

Denta-Chair 404
Seite 22

Pro-Vac
Seiten 14/15



Features

Autonom funktionierendes Cart mit integrierten ölfreien Kompressor, leisem Absaugsystem und Frischwasserbehälter

Qualitativ hochstehendes Edelstahlgehäuse

1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Spray) mit sterilisierbaren Spitzen

1 Speichel-/Chirurgieabsaugung

1 Hochleistungsabsaugung 300 l/min

Stufenlos regulierbar

Einzigartige BPR Swiss Technologie

2 Spraywasserbehälter: 2 × 2 Liter

Absaugbehälter: 6 Liter (automatischer Überlaufstopp)

Integrierte Absaugung

Integrierter ölfreier Kompressor: Max. Betriebsdruck von 4 bar

Technische Daten

Betriebsdruck: 3,0–4,0 bar

Gewicht: 55 kg

Dimensionen: 355mm × 690mm × 895mm





Garantie: 2 Jahre

Optionen: Polymerisationslampe, Amalgamabscheider

Pro-Vac Einzigartig komfortable Flexibilität

Das mobile und komplett autonome Absaugcart PRO-VAC unterstützt Sie mit uneingeschränkter Leistungsfähigkeit, Kosteneinsparungen und voller Flexibilität in Praxisalltag und Praxisplanung.

Das PRO-VAC erleichtert Ihre Arbeit dabei durch eine Drei-Weg-Spritze und eine beeindruckende Absaugleistung (300 l/min), die viele fix installierte Einheiten übertrifft. Trotz überragender Leistungsfähigkeit sind der ölfreie Kompressor und die integrierte Absaugung flüsterleise und sehr zuverlässig. Die Praxisabläufe können optional durch einen integrierten Amalgamabscheider weiter vereinfacht werden. Die kompakte Bauweise des PRO-VAC hilft dem Praxisteam eine optimale Hygiene effizient aufrecht zu erhalten. Maximale Flexibilität kombiniert mit höchster Leistung und Komfort.

-  Dauerbetrieb
-  Volle Leistungsfähigkeit
-  Plug-and-Play
-  Mobil/Rollbar

Pro-Vac

Autarke Hochleistungsabsaugung

300 l/min


Drei-Weg-Spritze

Speichelabsaugung

Leise integrierte Absaugung

Optional: mit Amalgamabscheider

Leiser ölfreier Kompressor

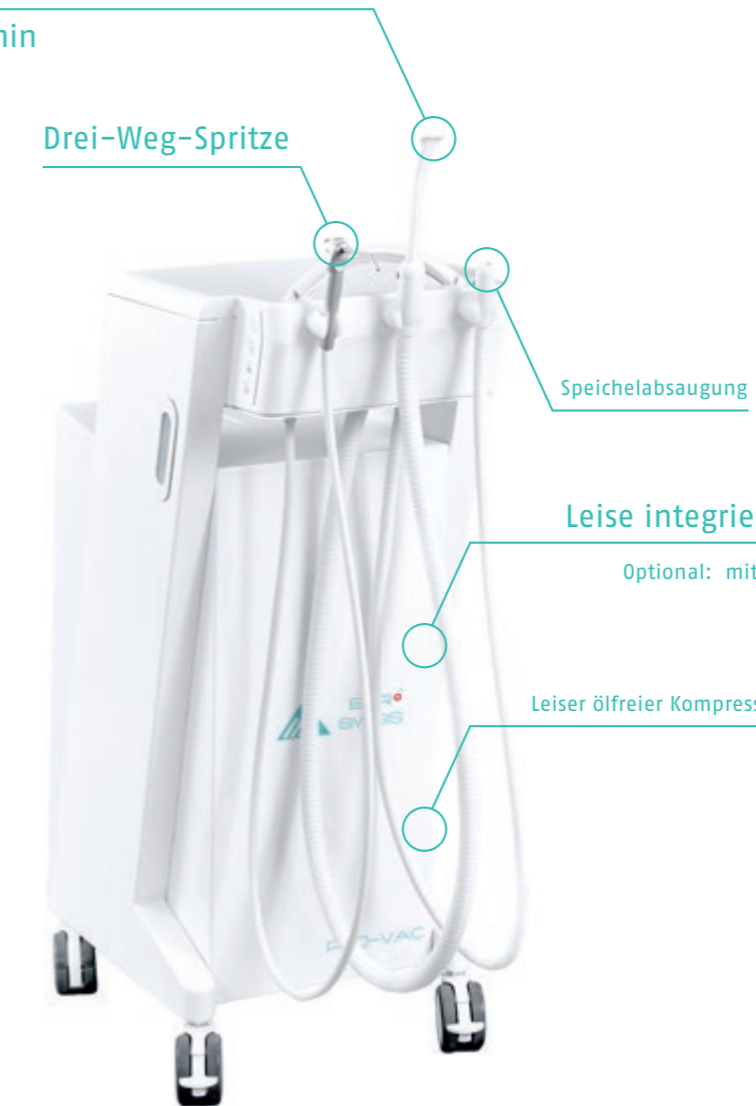

Semi-Autarke Dentaleinheit I3

Qualität. Mobilität. Klasse.

Die I3 verbindet Mobilität, Qualität und Klasse. Die aus Edelstahl gefertigten Carts bestehen durch benutzerfreundliche Handhabung und höchste Qualität. Diese Kombination garantiert eine effiziente Arbeitsweise und tiefe Unterhaltskosten. Um Patienten die Angst vor der zahnärztlichen Behandlung zu nehmen, können die Carts vor dem Eintreten des Patienten bequem zur Seite geschoben werden.

Die I3 wird, wie alle Behandlungseinheiten von BPR Swiss, für den Kunden massgeschneidert gefertigt. Die DENTA-LED Behandlungsleuchte hat in der Branche einen Meilenstein gesetzt und beschert dem Anwender ein unvergessliches Lichtelebnis.

Die semi-autarke Dentaleinheit I3.
Qualität. Mobilität. Klasse.

Denta-Cart 404
Seiten 18/19

Denta-Chair 404
Seite 22

Denta-LED
Seite 23

Denta-Vac
Seiten 20/21



Features

Qualitativ hochstehendes Edelstahlgehäuse

1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Zerstäuber) mit sterilisierbaren Spitzen

In sich geschlossenes Spraywassersystem für Drei-Weg-Spritze und Instrumente (ein Ventil mit Rücklaufsperr verhindert die Kontamination des Spraywassers)

Spraywasserbehälter: 2 × 0,75 Liter

4 Instrumentenschläuche mit Licht (6-Loch Anschluss)

Instrumentenschläuche abnehmbar

Luft- und Wasserregler für jedes Instrument

Fusspedal mit Spray on/off und Chip

Technische Daten

Luftverbrauch Instrumente: 35–55 l/min

Betriebsdruck Instrumente: 2,5–3,5 bar

Jedes Instrument ist einzeln einstellbar

Gewicht total: 21 kg

Dimensionen: 535mm × 580mm × 850mm

Garantie: 2 Jahre

Optionen: Elektrischer Motor mit LED Licht, Display und 30 Programmen, elektrischer Zahnsteinentferner, peristaltische Pumpe, Turbine, Luftmotor, Polymerisationslampe, Tableau usw.

Denta-Cart 404



Einfach genial

Das elegante Behandlungscart DENTA-CART 404 ist installationsfrei und mobil.

Zur Inbetriebnahme muss es lediglich an einen Luftanschluss und mit einem Stromstecker an den Strom angeschlossen werden. Das DENTA-CART 404 vereinfacht auf geniale Weise Ihre Arbeit und bietet Ihnen optimalen Komfort.

Die Instrumente können frei gewählt werden und erreichen auch im Dauerbetrieb volle Leistung. Aus vielen Optionen kann das für Sie perfekte Cart konfiguriert werden.

Der geniale Komfort des DENTA-CART 404 zeigt sich beispielsweise in seiner Wasserversorgung. Es ist mit zwei Spraywasserflaschen ausgestattet. Ist eine Spraywasserflasche leer, kann mit einem Schalter auf die zweite gewechselt und ohne Unterbruch weiterbehandelt werden. Mittels einem Schalter besteht die Möglichkeit zwischen der Wasserversorgung über die Spraywasserflasche und einer externen Wasserversorgung hin und her zu wechseln.

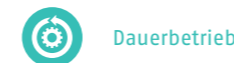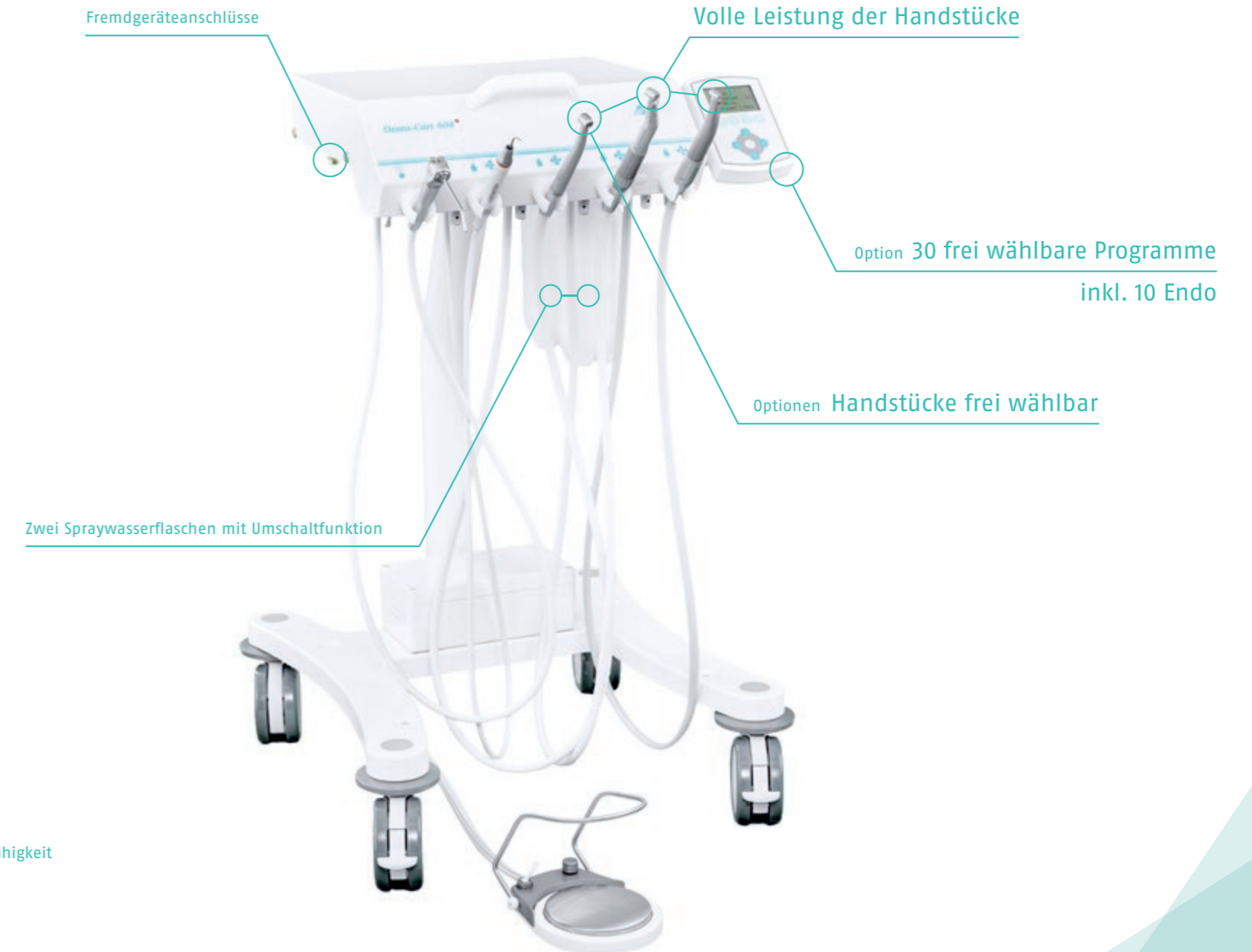

Dauerbetrieb



Volle Leistungsfähigkeit



Mobil/Rollbar

Denta-Cart 404

Features

Qualitativ hochstehendes Edelstahlgehäuse

1 Drei-Weg-Spritze (Luft/Wasser/Zerstäuber) mit sterilisierbaren Spitzen

In sich geschlossenes Spraywassersystem für Drei-Weg-Spritze und das Befüllen des Wasserglases

1 Speichelabsaugung

1 Hochleistungsabsaugung

1 Hochleistungsabsaugung mit Speischale aus sterilisierbarem Edelstahl

Technische Daten

Luftverbrauch Absaugungen: 25 l/min

Betriebsdruck: 4,5 bar

Spraywasserbehälter: 1,5 Liter

Separate Vakuumabsaugung mit 2 Liter Behälter für Chirurgie und bei Ausfall der Zentralabsaugung (automatischer Überlaufstopp)

Gewicht total: 21 kg


Dimensionen: 535mm × 580mm × 850mm

Garantie: 2 Jahre

Denta-Vac Durchdachte Flexibilität

Die aus Edelstahl gefertigte Absaugeinheit DENTA-VAC bietet grossen Komfort und Flexibilität.

Die DENTA-VAC ist mit drei Absaugungen ausgestattet. Sie bietet gegenüber einer herkömmlichen Absaugeinheit den Vorteil, dass sie neben zwei Absaugungen, welche durch einen externen Absaugmotor betrieben werden, eine autonome Absaugung besitzt. Fällt während einer Operation oder Behandlung der externe Motor aus, kann dank dieser autonomen Absaugung ohne Unterbruch weiterbehandelt werden. Die Speischale ist einfach abnehm- und sterilisierbar und genügt damit höchsten Hygieneansprüchen.

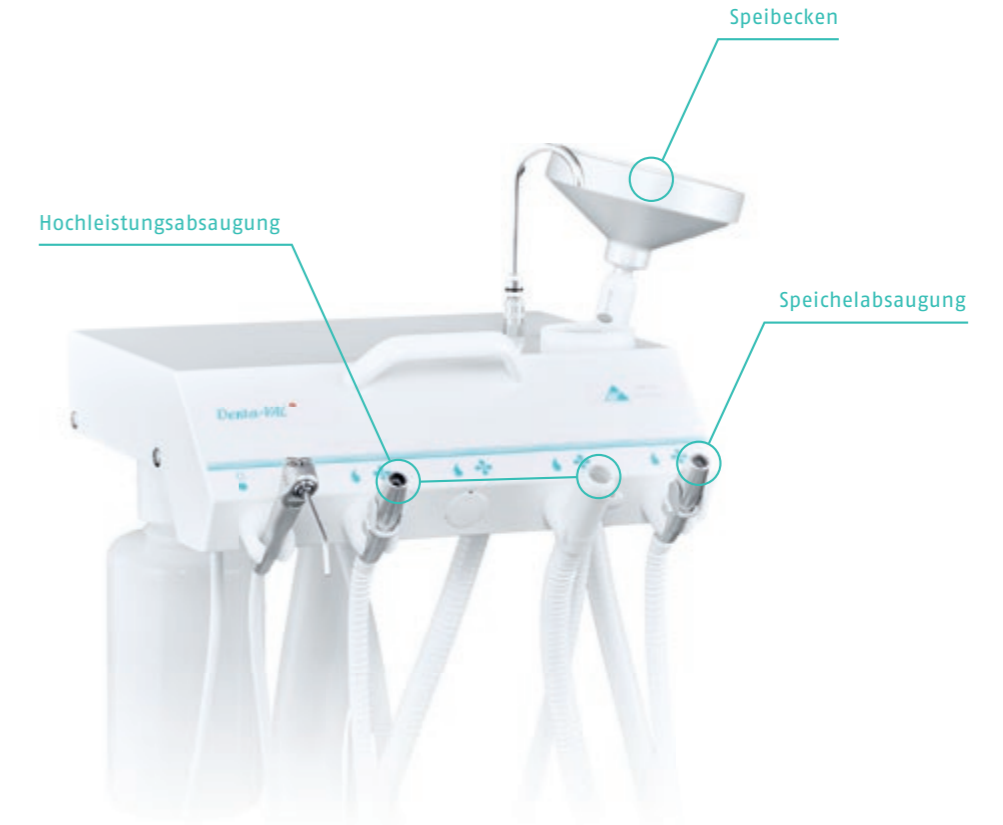

Dauerbetrieb



Volle Leistungsfähigkeit



Mobil/Rollbar

Denta-Vac

Denta-Vac

Features

Formschöner und bequemer Behandlungsstuhl

Erhältlich in 20 verschiedenen Farben

Gesamter Stuhl und Rückenlehne bequem über komfortables Fusspedal verstellbar

Bis zu 4 Positionen sind programmierbar

Technische Daten

Tragfähigkeit: 300 kg

Höhenverstellbarkeit: 400 mm

Garantie: 2 Jahre



Dauerbetrieb




Volle Leistungsfähigkeit



Plug-and-Play

Denta-Chair 404

Eleganz. Komfort. Klasse.

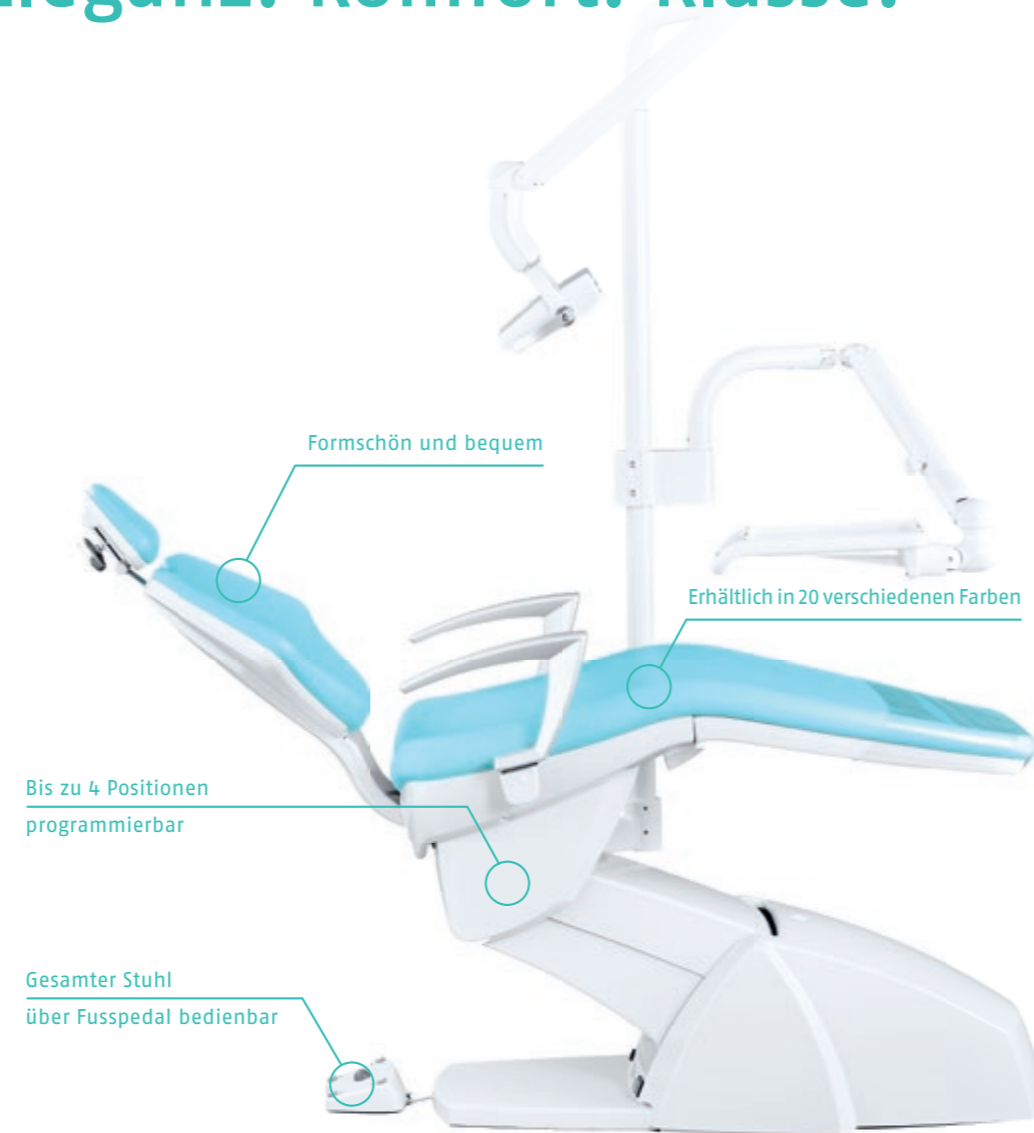

Denta-Chair 404

Denta-LED

Technologie. Design. Klasse.



Denta-LED

Features

Qualitativ hochstehendes Edelstahlgehäuse (kein Plastik)

Schattenlose Ausleuchtung des Arbeitsfeldes aufgrund von eingebautem Lichtfeldmanagement

Zuschaltbarer integrierter Filter, welcher Polymerisation bei jedem Komposit verhindert

Sensor für 3-Stufen-Dimmung und Ein- und Ausschalten der Leuchte

Abnehmbare und sterilisierbare Handgriffe

Technische Daten

Lichtstärke: 35'000 LUX (Distanz von 70 cm)

Farbtemperatur: 5'000 Kelvin +/- 10% (wie Tageslicht)

Lichtstärke bei eingeschalteten Kompositfilter: 27'500 LUX

Keine UV- und Infrarotstrahlung

Lebensdauer: 50'000 Stunden

Energieverbrauch: 20 W

Garantie: 2 Jahre



BPR⁺
SWISS

Innovation made in Switzerland

«Zwischen einem der führt und einem der folgt
unterscheidet Innovation»

Steven Paul Jobs (1955–2011), Erfinder des Macintosh

Willkommen bei den Pionieren.

BPR Swiss baut die erste autonome, ölfreie
Behandlungseinheit mit voller Leistungsfähigkeit.

BPR Swiss GmbH
Dental Mobility
Weststrasse 16
CH-3672 Oberdiessbach
Switzerland

T +41 (0)31 506 06 06

F +41 (0)31 506 06 00

info@bpr-swiss.com

www.bpr-swiss.com

ISO 13485 Version 03/2024